

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Yes, you can.[®]

NOTE: Check ALL parts for shipping damage. If shipping damage is noted, DO NOT use. Contact carrier/dealer for further instruction.

⚠ WARNING

- **DO NOT** install or use this equipment without first reading and understanding these instructions. If you are unable to understand the Warnings, Cautions or Instructions, contact a healthcare professional, dealer or technical personnel before attempting to install this equipment - otherwise, injury or damage may occur.
- Each individual should always consult with their physician or therapist to determine proper adjustment and usage.
- Invacare products are specifically designed and manufactured for use in conjunction with Invacare accessories. Accessories designed by other manufacturers have not been tested by Invacare and are not recommended for use with Invacare products.
- Proper height adjustments must be made to both the leg extension and the crutch handle. A dealer or therapist should aid in the proper placement for maximum balance and support.
- Be sure that snap buttons are fully protruding through the same respective adjustment hole of each leg extension. This ensures that the adjustable legs are securely locked into position and an even height adjustment is obtained.
- Wing nuts **MUST** be tight at all times.
- Ensure that rubber crutch tips are not ripped, worn or missing. Replace before using the crutches.
- **ALWAYS** observe the weight limit on the labeling of this product. Check that all labels are present and legible. Replace if necessary.

Patient Height Specification

NOTE: For models not listed, please check labeling on product.

MODEL	PATIENT HEIGHT MIN./MAX
8115-J, 8120-J, 8130-J	4'6" - 5'2"
8115-A, 8120-A, 8130 -A	5'2" - 5'10"

MODEL	PATIENT HEIGHT MIN./MAX
8115-T, 8120-T, 8130-T	5'10" - 6'6"

Adjusting Handle Position


1. Do one of the following:
 - Remove the wing nut and bolt securing the handle to the crutch (Detail "A").
 - Push both handle locks IN (direction of arrow stamped on side of handle lock) (Detail "B").
2. Align the handle with the desired set of adjustment holes.

NOTE: Quick Adjust Crutch - There will be an audible click when handle locks are fully engaged and secure.

3. If necessary, secure with wing nut and bolt.
4. Repeat for other crutch.

Adjust the Leg Extension

Depress both snap buttons on the leg extension and allow them to snap through the desired adjustment holes on the crutch leg frame. Repeat for other crutch (Detail "C").

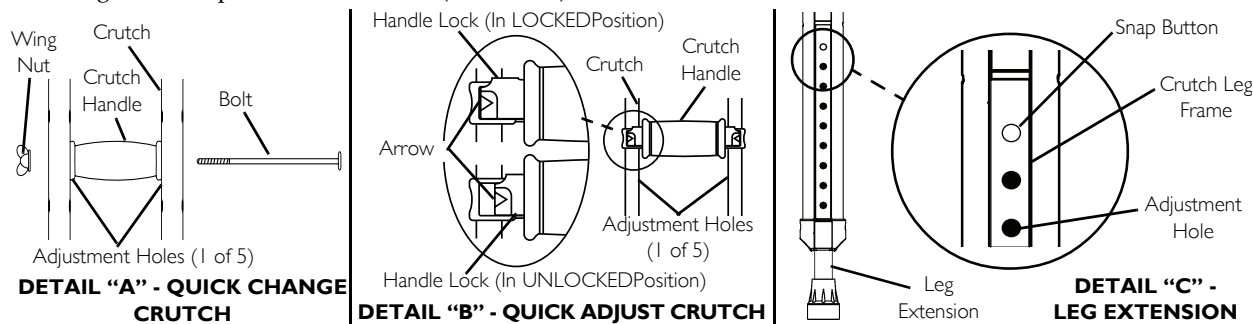

Limited Warranty

PLEASE NOTE: THE WARRANTY BELOW HAS BEEN DRAFTED TO COMPLY WITH FEDERAL LAW APPLICABLE TO PRODUCTS MANUFACTURED AFTER JULY 4, 1975.

This warranty is extended only to the original purchaser/user of our products.

This warranty gives you specific legal rights and you may also have other legal rights which vary from state to state.

Invacare warrants its product to be free from defects in material and workmanship for 3 years of use by original purchaser. If within such warranty period any such product shall be proven to be defective, such product shall be repaired or replaced, at Invacare's option. This warranty does not include any labor or shipping charges incurred in replacement part installation or repair of any such product. Invacare's sole obligation and your exclusive remedy under this warranty shall be limited to such repair and/or replacement.

For warranty service, please contact the dealer from whom you purchased your Invacare product. In the event you do not receive satisfactory warranty service, please write directly to Invacare at the address on the back page. Provide dealer's name, address, model number, date of purchase, indicate nature of the defect and, if the product is serialized, indicate the serial number.

Invacare Corporation will use a return authorization. The defective unit or parts must be returned for warranty inspection using the serial number, when applicable, as identification within thirty (30) days of return authorization date. **DO NOT** return products to our factory without our prior consent. C.O.D. shipments will be refused; please prepay shipping charges.

LIMITATIONS AND EXCLUSIONS: THE WARRANTY SHALL NOT APPLY TO PROBLEMS ARISING FROM NORMAL WEAR OR FAILURE TO ADHERE TO THE ENCLOSED INSTRUCTIONS. IN ADDITION, THE FOREGOING WARRANTY SHALL NOT APPLY TO SERIAL NUMBERED PRODUCTS IF THE SERIAL NUMBER HAS BEEN REMOVED OR DEFACED; PRODUCTS SUBJECT TO NEGLIGENCE, ACCIDENT, IMPROPER OPERATION, MAINTENANCE OR STORAGE; OR PRODUCTS MODIFIED WITHOUT INVACARE'S EXPRESS WRITTEN CONSENT (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO MODIFICATION THROUGH THE USE OF UNAUTHORIZED PARTS OR ATTACHMENTS, PRODUCTS DAMAGED BY REASON OF REPAIRS MADE TO ANY COMPONENT WITHOUT THE SPECIFIC CONSENT OF INVACARE; PRODUCTS DAMAGED BY CIRCUMSTANCES BEYOND INVACARE'S CONTROL; PRODUCTS REPAIRED BY ANYONE OTHER THAN AN AUTHORIZED INVACARE DEALER). SUCH EVALUATION SHALL BE SOLELY DETERMINED BY INVACARE. THE FOREGOING EXPRESS WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ANY OTHER WARRANTIES WHATSOEVER, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND THE SOLE REMEDY FOR VIOLATIONS OF ANY WARRANTY WHATSOEVER, SHALL BE LIMITED TO REPAIR OR REPLACEMENT OF THE DEFECTIVE PRODUCT PURSUANT TO THE TERMS CONTAINED HEREIN. THE APPLICATION OF ANY IMPLIED WARRANTY WHATSOEVER SHALL NOT EXTEND BEYOND THE DURATION OF THE EXPRESS WARRANTY PROVIDED HEREIN. INVACARE SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES WHATSOEVER. THIS WARRANTY SHALL BE EXTENDED TO COMPLY WITH STATE/PROVINCIAL LAWS AND REQUIREMENTS.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Yes, you can.®

REMARQUE: Vérifiez que TOUTES les pièces sont intactes à leur arrivée. Si elles sont endommagées, N'utilisez PAS ce matériel. Prenez contact avec le distributeur ou avec le transporteur pour obtenir les instructions appropriées.

⚠ AVERTISSEMENT

- **NE PAS** utiliser cet équipement sans d'abord avoir lu et compris ce feuillet. Si vous ne comprenez pas les avertissements, les notes attention et les instructions, veuillez contacter un professionnel des soins de santé, un fournisseur ou un technicien, avant d'installer cet équipement, sans quoi des blessures ou des dommages peuvent survenir.
- Chaque personne devrait toujours consulter son médecin ou son thérapeute pour déterminer le réglage et l'utilisation adéquats.
- Les produits Invacare sont spécifiquement conçus et fabriqués pour être utilisés avec les accessoires Invacare. Les accessoires conçus par d'autres manufacturiers n'ont pas été testés par Invacare et ne doivent pas être utilisés avec les produits Invacare.
- Les réglages adéquats pour la hauteur **DOIVENT** être faits au niveau de la rallonge de la patte et la poignée. Un fournisseur ou un thérapeute devrait vous aider pour vous assurer un maximum d'équilibre et d'appui.
- S'assurer que les boutons à ressort ressortent complètement des mêmes orifices de réglage de chaque rallonge de patte. Ceci permet d'assurer un blocage sécuritaire des pattes réglables et une hauteur égale.
- Les écrous à oreilles doivent être serrés en tout temps.
- S'assurer que les embouts de caoutchouc de la béquille ne sont pas usés, déchirés ou manquants. Le cas échéant, les remplacer avant d'utiliser les béquilles.
- Vérifiez **TOUJOURS** la charge limite sur la plaque signalétique du produit. Vérifiez que toutes les étiquettes soient présentes et lisibles. Au besoin, remplacez-les.

Spécifications de Taille du Patient

REMARQUE: Pour les modèles non listés, merci de vérifier les étiquettes qui sont apposées sur le produit.

MODÈLE	TAILLE MIN/MAX DU PATIENT
8115-J, 8120-J, 8130-J	4'6" - 5'2"
8115-A, 8120-A, 8130 -A	5'2" - 5'10"

MODÈLE	TAILLE MIN/MAX DU PATIENT
8115-T, 8120-T, 8130-T	5'10" - 6'6"

Régler la Position de la Poignée


1. Do one of the following:
 - Enlever l'écrou à oreilles et le boulon qui fixent la poignée sur la béquille (Schéma "A").
 - Pousser les deux bloqueurs de la poignée (la direction de la flèche est estampée sur le côté) (Schéma "B").
2. Aligner la poignée avec les orifices de réglage voulus.

REMARQUE: Béquilles à réglage rapide - au dé clic, les bloqueurs seront complètement et sécuritairement enclenchés.

3. Fixer avec l'écrou à oreilles et le boulon.
4. Répéter pour l'autre béquille.

Régler la Position de la Poignée

5. Enfoncer les boutons à ressort de la rallonge de patte et les laisser ressortir de l'orifice de réglage correspondant à la hauteur choisie. Répéter pour l'autre béquille (Schéma "C").

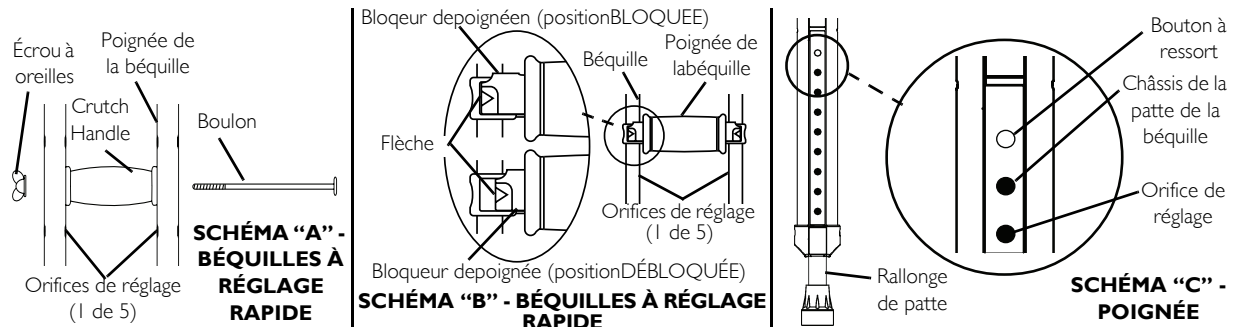

Garantie Limitée à Vie

REMARQUE: LA GARANTIE CI-DESSOUS A ÉTÉ RÉDIGÉE EN ACCORD AVEC LA LOI FÉDÉRALE APPLICABLE SUR LES PRODUITS FABRIQUÉS APRÈS LE 4 JUILLET 1975.

Cette garantie est valable pour l'acheteur/utilisateur initial de nos produits seulement.

Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques. D'autres droits variant d'un État à l'autre peuvent se rajouter.

INVACARE garantit ce produit à vie contre tout défaut de fabrication ou défaut dans le matériel et ce, pour l'acheteur/utilisateur initial. Si, durant cette période, ce produit devait s'avérer défectueux, ce dernier sera réparé ou remplacé, suivant le choix d'INVACARE. Cette garantie ne comprend aucun frais de main-d'œuvre ou d'envoi relié au remplacement ou à la réparation de ce produit. La seule et unique obligation d'INVACARE se limite au remplacement et/ou à la réparation du produit.

Pour le service, contacter le fournisseur qui vous a vendu le produit Invacare. Si vous n'obtenez pas un service satisfaisant, écrire directement à INVACARE à l'adresse indiquée ci-dessous. Fournir le nom du fournisseur, l'adresse, le numéro de modèle et la date d'achat, indiquer la nature du problème et, si le produit comporte un numéro de série, indiquer ce dernier.

Invacare émettra une autorisation de retour. L'unité ou les pièces défectueuses doivent être retournées pour vérification de garantie, en indiquant le numéro de série, s'il y a lieu, dans les trente (30) jours suivant la date de réception de l'autorisation de retour. NE PAS retourner un produit à l'usine sans d'abord avoir obtenu notre consentement. Les envois C.O.D. (payables sur réception) seront refusés. Veuillez payer à l'avance les frais d'envoi.

RESTRICTIONS: LA GARANTIE NE S'APPLIQUE PAS AUX PROBLÈMES DÉCOULANT DE L'USURE NORMALE, OU SI LES INSTRUCTIONS CI-INCLUSES N'ONT PAS ÉTÉ RESPECTÉES. DE PLUS, LA PRÉSENTE GARANTIE NE S'APPLIQUE PAS AUX PRODUITS DONT LE NUMÉRO DE SÉRIE A ÉTÉ EFFACÉ OU MODIFIÉ, AUX PRODUITS MAL ENTRETENUS, ACCIDENTÉS, INADÉQUATEMENT UTILISÉS, ENTRETENUS OU ENTREPOSÉS, AUX PRODUITS MODIFIÉS SANS LE CONSENTEMENT ÉCRIT D'INVACARE, INCLUANT, MAIS NE SE LIMITANT PAS À, LA MODIFICATION AVEC DES PIÈCES OU ACCESSOIRES NON AUTORISÉS, AUX PRODUITS ENDOMMAGÉS PAR DES RÉPARATIONS FAITES SANS L'APPROBATION D'INVACARE, OU AUX PRODUITS ENDOMMAGÉS DANS DES CIRCONSTANCES AU-DELÀ DU CONTRÔLE D'INVACARE, AUX PRODUITS RÉPARÉS PAR UNE PERSONNE AUTRE QU'UN FOURNISSEUR AUTORISÉ INVACARE, ET L'ÉVALUATION SERA FAITE PAR INVACARE.

LA PRÉSENTE GARANTIE EST EXCLUSIVE ET REMPLACE TOUTES LES AUTRES GARANTIES, LES GARANTIES IMPLICITES, S'IL Y A LIEU, INCLUANT LA GARANTIE DE COMMERCIALISATION ET D'AJUSTEMENT DANS UN BUT PARTICULIER, ET LE RECOURS POUR VIOLATION DE QUELCONQUE GARANTIE IMPLICITE DOIT SE LIMITER À LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT DU PRODUIT DÉFECTUEUX CONFORMÉMENT AUX PRÉSENTS TERMES. L'APPLICATION DE TOUTE GARANTIE IMPLICITE NE DOIT PAS SE PROLONGER AU-DELÀ DE LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE. INVACARE NE SERA PAS TENU RESPONSABLE POUR TOUT DOMMAGE-INTÉRÊT ACCESSOIRE OU INDIRECT.

CETTE GARANTIE DEVRA ÊTRE ÉLARGIE POUR RÉPONDRE AUX LOIS ET AUX RÉGLEMENTS DES ÉTATS (PROVINCES).

Invacare Corporation www.invacare.com



Yes, you can.®

USA
One Invacare Way
Elyria, Ohio USA
44036-2125
800-333-6900

Canada
570 Matheson Blvd E Unit 8
Mississauga Ontario
L4Z 4G4 Canada
800-668-5324

All rights reserved. Trademarks are identified by the symbols ™ and ®. All trademarks are owned by or licensed to Invacare Corporation unless otherwise noted.
© 2007 Invacare Corporation

Part No 1145751
Rev A - 04/07